

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

"GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT ET PIVOTANT"


RÉFÉRENCE : DEH902



Le guidon TRANSI PRO® est un appareil d'aide au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs.

Grâce à sa base pivotante solidaire d'un guidon de maintien, d'appuis tibiaux réglables et inclinables ainsi que d'une sangle dorso-lombaire, il permet de réaliser rapidement un transfert assis-assis en toute sécurité avec l'aide d'un aidant. Le châssis roulant permet le transport d'un patient sur de courtes distances.

TRANSI PRO® est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le coucher d'un patient ayant la capacité à la station debout. Livré avec la sangle dorso-lombaire SANTRA® ■

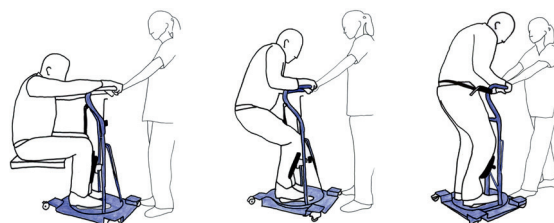

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES + PRODUIT

Appuis tibiaux réglables en hauteur et en largeur et inclinables pour accompagner la verticalisation.


Sangle dorso-lombaire sécurisant le patient pendant le transfert.

Equipé de 4 roulettes à frein autobloquant.

Blocage de la rotation indexée sur 8 positions.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE

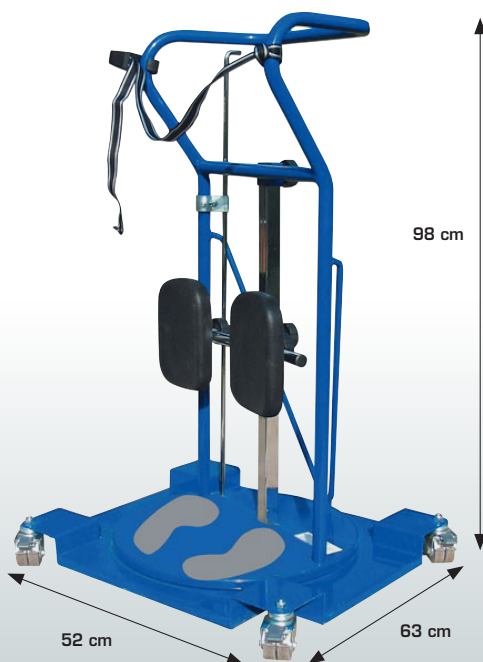

PRODUIT :	TRANSI PRO®
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT ET PIVOTANT
RÉFÉRENCE :	DEH902
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370311
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	28 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Contribue au transport d'un sujet sur une courte distance. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples. Doit être utilisé sur un sol plat, régulier et sans obstacle. Les freins doivent être actionnés lors de la verticalisation du patient et lors de sa descente du guidon.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser un patient seul sur le TRANSI PRO®. Ne jamais s'asseoir sur la barre d'appui.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p> <p>Les roulettes nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris etc, procéder à leur échange.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
PIÈCES D'USURES :	<p>Appuis tibiaux, roulettes, roulements pivotants.</p>
COMPOSITION :	<p>Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PVC, nylon.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant le guidon de transfert pivotant TRANSI PRO®, la sangle SANTRA®, sa fiche technique et sa notice de montage.</p>
COULEUR :	<p>Bleu</p>