

PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SIIM403



La planche de transfert SPLIT® est composée d'une surface lisse et d'une base antidérapante. Positionnée entre deux plans assis, elle permet à l'utilisateur de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée.

On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, rééducation.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions ■

LES PRODUIT

Forme courbée ergonomique.

Poignée ergonomique.

Plots antidérapants sur la face intérieure.

OPTIONS

GERIA-MAX




OLIVIA



Peut être associée avec une sangle de transfert GERIA-MAX® ou OLIVIA® ou avec un drap MULTIGLIDE® pour les transferts de personnes nues.

MULTIGLIDE

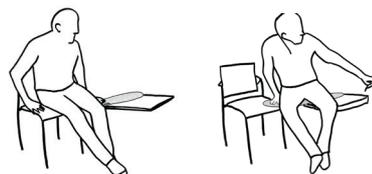

© NFCA Pictures




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	SPLIT®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM403
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012451180
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	1,4 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé.</p> <p>En zone humide, vérifier l'adhérence.</p> <p>Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé.</p> <p>Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés.</p> <p>Avant le transfert, s'assurer que le patient n'a pas la peau pincée par la planche.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la planche SPLIT® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, Séchage à l'air).</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Polyéthylène.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant la planche SPLIT® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Blanc.</p>
DIMENSIONS :	<p>77 x 23 x 0,8 cm</p>