



SIÈGE DE TRANSFERT COULISSANT ET PIVOTANT POUR LE BAIN ET LA DOUCHE

RÉFÉRENCE :
SUN11100NC

Le siège de transfert coulissant et pivotant pour le bain et la douche SANSUBA® permet d'entrer et sortir aisément de la baignoire ou de la douche.

Déplaçable à gauche et à droite, il pivote à 360° pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire ou de la douche grâce aux molettes simples d'utilisation. Un cran de sécurité permet de verrouiller la position souhaitée.

Simple d'installation, il suffit de poser le siège SANSUBA® entre la baignoire/la douche et le sol. Ses 4 pieds réglables en hauteur, sans outils, permettent de s'adapter aux différents modèles de baignoire/douche et assurent la stabilité du siège. Les accoudoirs, complètement escamotables vers le haut pour faciliter l'accès au siège, permettent à l'utilisateur de prendre appui lors de l'installation.

Le siège et les accoudoirs rembourrés en mousse souple apportent du confort à l'utilisateur ■



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



LES + PRODUIT

Assise pivotante et coulissante, confortable pour l'utilisateur.

Utilisation seul ou accompagné, le siège permet le **maintien de l'autonomie**.

S'adapte aux différentes largeurs de baignoires et aux bacs à douche.

Accoudoirs escamotables et molettes indexées pour le verrouillage des positions de sécurité.

ACCESSOIRES



4 Pieds réglables en hauteur
41 cm - Réf : SUN11101NC



Extension Paire rails translation
70 cm - SUN11102NC
80 cm - SUN11103NC

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER

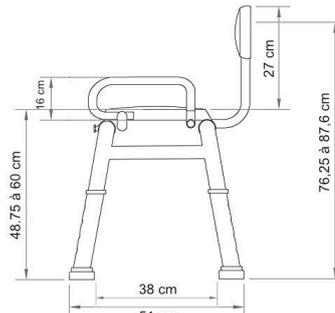
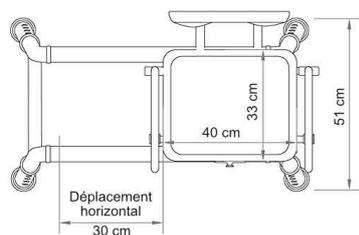
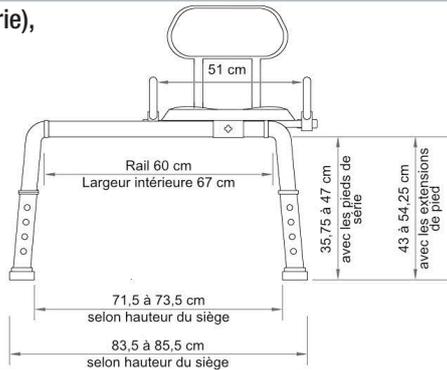
FICHE TECHNIQUE



Réf	Désignation	N° Identification UDI
SUN11100NC	Siège SANSUBA®	04250629326715
SUN11101NC	4 pieds réglables	04250629328535
SUN11102NC	Extension rails 70 cm	04250629328542
SUN11103NC	Extension rails 80 cm	04250629328559

PRODUIT :	SANSUBA®
DESCRIPTION COURTE :	SIÈGE DE TRANSFERT COULISSANT ET PIVOTANT POUR LE BAIN ET LA DOUCHE
RÉFÉRENCES :	SUN11100NC
DATE DE MISE À JOUR :	12/07/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	8,25 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	120 KG
FABRICANT :	SUNDO
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle pour aider le transfert lors de l'entrée ou de la sortie du bain/douche. Avant chaque utilisation, vérifier la stabilité du siège de bain afin d'éviter les glissements. Le siège de bain SANSUBA® s'adapte également aux baignoires modernes de formes spéciales (hauteur maximale de 43 cm).
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas se tenir debout sur la surface d'assise du siège de bain SANSUBA®.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Aluminium, EVA, PU.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant le siège SANSUBA® et sa fiche technique.
COULEUR :	Bleu et chrome.
DIMENSIONS :	Déplacement horizontal du siège : 30 cm (avec les rails de série), ou 40 cm ou 50 cm (avec les extensions de rails). <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">    </div>