

HOUSSES POUR PLANCHES DE TRANSFERT


RÉFÉRENCES

SIPMF9086/96 / SIPMF9151 / SIPMF9171 / SIPMF9181 / SIPMF9191
SIPMF9090 / SIPMF9152 / SIPMF9172

La planche de transfert ROLLVISION® est constituée d'un plan souple confortable entouré d'une housse coulissante amovible. Elle permet à un ou deux soignants de transférer un patient allongé en le faisant glisser dessus.

La ROLLVISION® est équipée d'une housse textile facilitant le transfert d'un patient allongé en le faisant glisser dessus.

Il existe également un modèle de housse PEM à usage unique. Ce type de housse vient alors remplacer la housse textile, en usage monopatient. Elle est particulièrement adaptée pour les services à forts risques infectieux ■

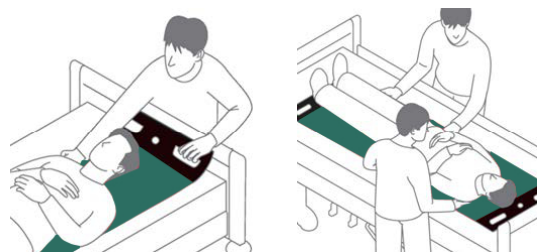

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



LES PRODUIT

ROLLVISION® est radiotransparente.


Matière plus souple permettant un meilleur confort pour le patient.

Housse amovible.

La planche ROLLVISION® est très légère.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Dimensions	Pliable	Poids
SIPMF9085 N° Identification UDI : 04250355390851	Planche de transfert ROLLVISION® Demi-corps pliable équipée sa housse textile	50 x 95 cm	Oui	0,9 kg
SIPMF9095 N° Identification UDI : 04250355390950	Planche de transfert ROLLVISION® Demi-corps non pliable équipée sa housse textile	50 x 95 cm	Non	0,9 kg
SIPMF9150 N° Identification UDI : 04250355391506	Planche de transfert ROLLVISION® Demi-corps pliable bariatrique équipée sa housse textile	60 x 150 cm	Oui	1,3 kg
SIPMF9170 N° Identification UDI : 04250355391704	Planche de transfert ROLLVISION® Corps entier pliable équipée sa housse textile	50 x 180 cm	Oui	1,5 kg
SIPMF9180 N° Identification UDI : 04250355391803	Planche de transfert ROLLVISION® Corps entier pliable équipée sa housse textile	50 x 195 cm	Oui	1,8 kg
SIPMF9190 N° Identification UDI : 04250355391902	Planche de transfert ROLLVISION® Corps entier non pliable équipée sa housse textile	50 x 195 cm	Non	1,8 kg

Référence ROLLVISION	Housse textile de rechange	Housse PEM à Usage Unique
SIPMF9095	SIPMF9086/96	SIPMF9090
SIPMF9085	SIPMF9086/96	SIPMF9090
SIPMF9150	SIPMF9151	SIPMF9152
SIPMF9170	SIPMF9171	SIPMF9172
SIPMF9180	SIPMF9181	
SIPMF9190	SIPMF9181	

PRODUIT :	ROLLVISION®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIPMF9085 / SIPMF9095 / SIPMF9150 / SIPMF9170 / SIPMF9180 / SIPMF9190
DATE DE MISE À JOUR :	16/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG À UNE DISTANCE < 15 CM
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, dans les services d'imagerie et les services de soin.</p> <p>Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, le matelas de transfert ROLLVISION® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, chlore et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Entretien de la planche : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</p> <p>Entretien de la housse textile :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 60° en machine. Séchage en machine à 45-50° maximum. Autoclave interdit. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air) de PH neutre. • Lavage à la main, trempage et essuyage.
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Planche : Polyéthylène , sans latex. / Housse : Polyéthylène enduit, sans latex.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant le planche de transfert ROLLVISION® et sa housse textile, sa notice de montage et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Planche de transfert : noire. Housse textile : verte.</p>